



inspire joy of life
ACTIVE
PRODUKTE

INHALT

STARRRAHMEN-ROLLSTÜHLE



NANO
1.155
SEITE 8



HURRICANE
DAILY
1.880
SEITE 10



HURRICANE S
1.880
SEITE 11

ADAPTIV- (AKTIV) FALTROLLSTÜHLE



NANO X
1.156
SEITE 14



SMART
2.360
SEITE 18



SMART
2.370
SEITE 19



AVANTI
1.736
SEITE 20



AVANTI PRO
1.735
SEITE 21

KIDS



FLASH
1.135
SEITE 24



FLASH RÜCKEN-
SYSTEM 1.135
SEITE 25

SPORT-ROLLSTÜHLE



HURRICANE SPORT
1.880
SEITE 26



HURRICANE PRO
1.880
SEITE 27

NETTI/RIDE



RIDE® FORWARD
Das Sitzkissen umschließt das Becken mit stützenden Konturen und reduziert gleichzeitig den Druck in Risikobereichen rund um Knochenvorsprünge. Dies hilft bei der Verbesserung der Haltungskontrolle ohne Einschränkungen beim Hautschutz.



RIDE® JAVA SEAT
Sichere und stabile Unterstützung der Bereiche mit geringem Risiko und Entlastung der Bereiche mit hohem Risiko. Verhindert das Entstehen von Wärme und Feuchte. Sehr hohe Sitzstabilität. Auch für Nutzer mit mittlerem bis hohem Hautrisiko.



RIDE DESIGNS JAVA RÜCKEN
Das patentierte Design von Java verfügt über die nötige Flexibilität, um sich Rumpf und Becken exakt anzupassen, für hervorragende Unterstützung, Komfort und Mobilität. Der Benutzer erfährt Komfort und Stabilität in Ruhe und keine Beeinträchtigung von Funktion und Mobilität. Der Java Back ist am effektivsten, wenn er mit einem Ride® Rollstuhlkissen verbunden wird, um die posturale Kontrolle zu unterstützen und das Risiko von Gewebeverletzungen zu reduzieren.

NEU:
FÜR ALLE ACTIVE
ROLLSTÜHLE
VERFÜGBAR



KRANKHEITSBILDER & FUNKTIONALITÄTS-ANSPRUCH

MEYRA® ACTIVE ROLLSTÜHLE



KRANKHEITSBILDER

ALS MS Multiple Sklerose										
hoher Querschnitt niedriger Querschnitt Spina bifida										
Glasknochen Muskeldystrophie Duchenne, SMA ICP Frühkindliche Hirnschädigung Kleinwuchs										
Schädel-Hirn-Trauma										
Beinamputationen										
Kurzzeitversorgungen nach chirurgischen-, orthopädischen Operationen										
Parkinson										
Schlaganfall										
Adipositas										
Geriatr. Versorgungen										

FUNKTIONALITÄTSANSPRUCH IN DEN VERSCHIEDENEN MEDIZINISCHEN FACHGEBIETEN

Geriatrie										
Innere Medizin										
Pädiatrie										
Neurologie										
Orthopädie, Traumatologie										

WEITERE INFORMATIONEN
UNSERE FACHHÄNDLER BERATEN SIE GERNE

MODERN. SICHER. INNOVATIV.

MEYRA®
Lichtsystem

DAS INNOVATIVE LED-FUSSBRETT

- 14 langlebige LEDs für helle Fahrbahnausleuchtung
- Lichtkegel um 120° einstellbar
- das LED Rücklicht sorgt für eine ausgezeichnete Sichtbarkeit im Straßenverkehr und lässt dich Hindernisse frühzeitig erkennen
- 12 V Lithium-Ionen-Akku mit 30 Stunden Laufzeit, einfache Aufladung über Ladebuchse auf der Rückseite
- Fußbrett bei Faltrollstühlen um 90° hochklappbar
- geringes Zusatzgewicht
- Bedienung per Smartphone-App oder direkt am Fußbrett
- für alle MEYRA Rollstühle nachrüstbar



SORGE SELBST FÜR DEN PERFEKTEN VORTRIEB DEINES ROLLSTUHLES MIT DEM EINZIGARTIGEN REIFENDRUCKKONTROLLSYSTEM

Der Reifendruck entscheidet maßgeblich über die Performance eines Rollstuhles. Mit diesem extra für Rollstühle entwickelten Tools hast du die Performance in deiner Hand. Für viele MEYRA Rollstühle nachrüstbar.

- Sensor einfach auf das Reifenventil aufzuschrauben
- Verbindung mit dem Smartphone über Bluetooth
- Kontrolle des Reifendrucks per App
- einstellbare Alarmfunktion bei Grenzwertüberschreitung oder geringem Batteriestand
- Reifendruckbereich von 1 - 9 Bar, weniger Reifenverschleiß
- mit austauschbarer Knopfzellen Batterie

MEYRA®
Reifendruckkontrollsystem



NANO
PURE
DESIGN

PURE DESIGN

NANO
1.155



NANO – DESIGN IN VOLLENDUNG

- Starrrahmen mit offenem Rahmenkonzept
- Lenkräder mit präzisen Einstellungsmöglichkeiten
- hochwertiges 7020 Aluminium
- eine Vielzahl von modernsten Rahmenfarben
- individuell einstellbare Seitenteile
- Varioelement für deine perfekte Anpassung
- Rücken auf Sitz klappbar inkl. Rastfunktion serienmäßig
- durch die integrierten Funktionen kann eine der schmalsten Gesamtbreiten realisiert werden
- hervorragende Verladeeigenschaft dank minimalem Gewicht und austariertem Schwerpunkt
- einzigartige Fahreigenschaften und Komfort
- eigens Designte Carbonelemente



JUST HURRICANE

HURRICANE DAILY – KOMPROMISSLOS ZUVERLÄSSIG

- der Maßanzug für deinen Körper
- perfektes Verhältnis von Gewicht und Stabilität
- eigenes Farbkonzept
- hochwertige Materialien (z.B. 7020 T6 Aluminium und Carbon)
- perfektes Feedback dadurch das deine Seitenteile individuell an Sitzposition angepasst werden
- Starrrahmen mit fest verschweißtem Fahrwerk
- handgefertigt von Anfang bis Ende
- die Wärmebehandlung nach der Produktion sorgt für eine Stabilität die ihres gleichen sucht



HURRICANE
EVERYDAY
1.880



HURRICANE S
1.880



HURRICANE S – ELEGANT & SPORTLICH

- fest verschweißter, offener S-Rahmen
- perfektes Verhältnis von Gewicht und Stabilität
- eigenes Farbkonzept
- hochwertige Materialien (z.B. 7020 T6 Aluminium und Carbon)
- Perfektes Feedback dadurch das deine Seitenteile individuell an Sitzposition angepasst werden
- Starrrahmen mit fest verschweißtem Fahrwerk
- handgefertigt von Anfang bis Ende
- die Wärmebehandlung nach der Produktion sorgt für eine Stabilität die ihres gleichen sucht



NANO X
DESIGN
YOUR
FREEDOM

DESIGN YOUR FREEDOM

NANO X – DESIGN TRIFFT FALTFUNKTION

- einzigartiges Faltsystem in Sandwichbauweise für ein Fahrverhalten welches einem Starrrahmen ähnelt die intuitive Bedienung ermöglicht für einfachstes Handling
- hochwertiges 7020 Aluminium
- Gewichtsorientierte Rahmenbauweise
- extrem flache Kreuzstrebe für ein einzigartig eigenständiges cleanes design
- perfektes Verhältnis zwischen Gewicht und Haltbarkeit
- modern, dank offenem Rahmenkonzept und zahlreichen Farbvariationen
- schnelle Anpassungsmöglichkeiten
- servicefreundlich und wartungsarm
- für den Wiedereinsatz perfekt geeignet
- intuitives Montagekonzept mit einem riesigen Einstellbereich



NANO X
1.156





SMART
ENJOY LIFE,
STYLE &
DRIVE

ENJOY LIFE. STYLE. DRIVE.

SMART^F – OPTIMIERTES FALTSYSTEM

- hochwertiges 7020 Aluminium
- ein super geringes Faltmaß und eine perfekte Faltkinematik sorgen für einfachstes falten
- integrierte Beinstützen
- alle Bauteile sind perfekt aufeinander angepasst und erleichtert das Handling im Alltag
- hochwertige Materialien und eigens konzipierte Halbzeuge garantieren ein niedriges Gesamtgewicht
- perfekte Fahrwerkeinstellungen
- Carbon-Seitenteile
- schwenkbare Light-Bremse mit extrem geringer Betätigungskraft



SMART^F
2.360



SMART^S
2.370




SMART^S – OPTIMIERTES FALTSYSTEM

- hochwertiges 7020 Aluminium
- ein super geringes Faltmaß und eine perfekte Faltkinematik sorgen für einfachstes falten
- abschwenk- und abnehmbare Beinstützen
- alle Bauteile sind perfekt aufeinander angepasst und erleichtert das Handling im Alltag
- optimale Leichtläufigkeit und Anpassungsfähigkeit
- Seitenteile mit höhenverstellbarer Armlehne und Einhandbedienung
- perfekte Fahrwerkeinstellungen
- neue Druckbremse mit extrem geringer Betätigungskraft
- hochwertige Materialien und eigens konzipierte Halbzeuge garantieren ein niedriges Gesamtgewicht

CELEBRATE YOUR LIFE

AVANTI – VIELSEITIG UND AKTIV

- feinstufige Anpassungsmöglichkeiten
- kompatibel zum MEYRA-Baukastensystem
- viel Zubehör verfügbar
- Bremse mit extrem geringer Betätigungskraft
- teleskopier- und winkleinstellbare Rückenhöhe
- höhenverstellbares Seitenteil mit Einhandbedienung
- extrem anpassungsfähig, selbst Sitzhöhen ab 37 cm sind realisierbar
- serienmäßiger Anpassrücken
- Exzentertechnologie für ein einfaches Anpassen des Fahrwerks

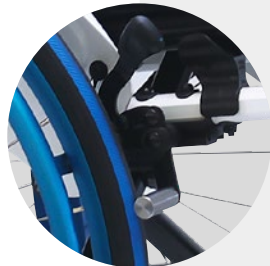

AVANTI
1.736



AVANTI
PRO
1.735



AVANTI PRO – PERFEKTE EINSTELLMÖGLICHKEITEN

- durchgehender Rahmen mit integrierten Beinstützen
- Langzeitversorgung mit hohem Anpassungsbedarf
- faltbarer Adaptiv-Rollstuhl
- hohe Teilekompatibilität und Anpassbarkeit
- Bremse mit extrem geringer Betätigungskraft
- Spurentreu und individuelle Fahrwerkeinstellungen
- verwindungsarmes Fahrverhalten dank Stabilisierungsbügel
- serienmäßiger Anpassrücken




FLASH
ENORM
FLEXIBEL


THE ROLLING LIGHTNING

FLASH – PERFEKTE ANPASSUNG

- minimalistischer Faltrollstuhl mit maximaler Variabilität
- für den aktiven Kinder- und Jugendbereich
- leichtgängig und wenig
- enorme Beinfreiheit
- Radstand und Schwerpunkt individuell einstellbar
- mitwachsende Sitzeinheit
- abduzierter Vorderrahmen serienmäßig
- Midi- und Maxi-Rahmen verfügbar
- Sitztiefenverstellung über Adapter nach vorne
- teleskopierbare Rückeneinheit um 4,5 cm nach hinten
- Sitzbreitenanpassung über Adapter
- perfekt einstellbare Unterschenklänge

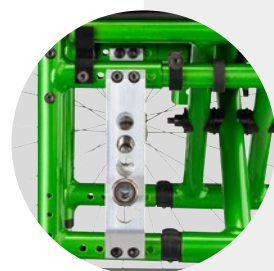

FLASH
1.135

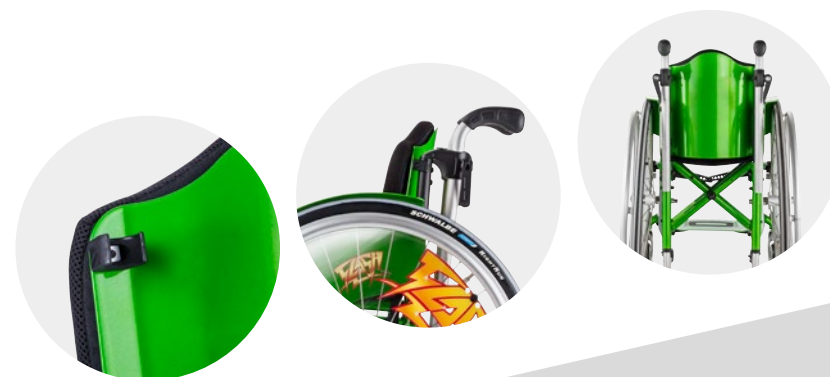

FLASH
RÜCKEN-
SYSTEM
1.135



FLASH RÜCKENSYSTEM – DAS RÜCKENSYSTEM MIT SCHWUNG

- anatomisch geformt (konkave Rückenschale) aus Aluminium
- optimale Positionierung bei geringem Gewicht
- schnelle und einfache Montage
- werkzeuglos am Rückenrohr montierbar, abnehmbar
- atmungsaktive Netzbezüge oder Trevira
- mit oder ohne Rückenpolster
- individuell anpassbar durch 3 Muldentiefen

THE PRECISION INSTRUMENT

HURRICANE SPORT – UNBESCHREIBLICHE SPIELKONTROLLE 15 JAHRE ERFAHRUNG, 15 JAHRE PERFEKTION

- 7020 Aluminium
- 100 % individuelle Anfertigung, Handmade
- Oversize-Achse für enorme Stabilität
- inklusive Stützrolle
- dynamisch für Höchstgeschwindigkeiten
- hochfeste Elemente, aus einem Stück gefertigt, für ein besseres Fahrverhalten
- Seitenteile individuell gefertigt und verschweißt
- Steigerung der Dauerfestigkeit durch speziellen Warmauslagerungsprozess
- Gewichtsersparnis durch spezielle Aluminiumlegierung
- Individuelle Pulverbeschichtung ohne Aufpreis



HURRICANE
SPORT
1.880



HURRICANE PRO – DAS EINSTEIGERMODELL

- hochwertiges 7020 Aluminium
- stufenlos verstellbares Oversize-Achsrohr zur idealen Schwerpunkteinstellung
- voll ausgestattet
- prädestiniert für Mehrfachnutzung
- individuell verstellbare Fußplatte
- Steigerung der Dauerfestigkeit durch speziellen Warmauslagerungsprozess
- fest verschweißte Doppel-Stützrolle für maximale Sicherheit
- verschraubte Aluminium-Seitenteile ermöglichen eine Sitzbreitenverstellung

HURRICANE
PRO
1.880



PRODUKTVORTEILE



- NANO 1.155**
SEITE 8
- haltbar und stabil
 - optimale Rohrdurchmesser und ideale Wandstärke
 - kompakt durch klappbaren Rücken und intelligentem Montagekonzept
 - geringes Gewicht
 - vielfältiges Farbkonzept



- HURRICANE EVERYDAY 1.880**
SEITE 10
- individuelle Anpassung an Körpermaße zur Unterstützung rehabilitative Ziele
 - abgestimmtes Fahrwerk
 - perfektes Fahrverhalten
 - 100 % Made in Germany



- HURRICANE S 1.880**
SEITE 11
- individuelle Anpassung an Körpermaße zur Unterstützung rehabilitative Ziele
 - elegant, sportliches Auftreten
 - abgestimmtes Fahrwerk
 - perfektes Fahrverhalten
 - 100 % Made in Germany



- NANO X 1.156**
SEITE 14
- Sandwichbauweise
 - Einzigartiges System
 - Extreme Stabilität
 - Intuitives, einfaches falten
 - Perfekte Faltkinematik
 - Fast nicht sichtbar



- SMART² 2.360**
SEITE 18
- optimiertes Faltsystem mit nahezu paralleler Faltkinematik, eigenständiges Einrasten
 - geringes Faltnmaß
 - Funktionselemente mit Einhandbedienung
 - geringe Betätigungskräfte beim Bremsen dank Light-Bremse aus Aluminium
 - individuelles Farbkonzept



- SMART³ 2.370**
SEITE 19
- optimiertes Faltsystem mit nahezu paralleler Faltkinematik, eigenständiges Einrasten
 - geringes Faltnmaß
 - Funktionselemente mit Einhandbedienung
 - geringe Betätigungskräfte beim Bremsen dank neuer Druckbremse
 - individuelles Farbkonzept
 - neue abschwengbare, winkel- und tiefenverstellbare Beinstützen mit Alu-Fußplatte



- AVANTI 1.736**
SEITE 20
- extrem anpassungsfähig auch bei sich verändernden Krankheitsbild
 - hohe Variabilität ohne Teilaustausch
 - kompatibel zum MEYRA-Baukastensystem
 - vielfältiges, therapeutisch bewährtes Zubehör



- AVANTI PRO 1.735**
SEITE 21
- extrem anpassungsfähig auch bei sich verändernden Krankheitsbild
 - hohe Variabilität ohne Teilaustausch
 - kompatibel zum MEYRA-Baukastensystem
 - vielfältiges, therapeutisch bewährtes Zubehör



- FLASH**
SEITE 24
- stufenlos einstellbare Unterschenkellänge ab 20 cm
 - perfekte Anpassung an die individuellen Maße des Kindes
 - Sitztiefen- und Sitzbreitenverstellung über Adapter nach vorne
 - teleskopierbare Rückeneinheit um 4,5 cm nach hinten



- HURRICANE SPORT 1.880**
SEITE 26
- Abmessungen immer regelkonform
 - hochfeste Konstruktion aus 7020 T6 Aluminium
 - maximale Festigkeit bei minimalem Gewicht
 - 100 % Made in Germany
 - abgestimmtes Fahrwerk für ein perfektes Fahrverhalten



- HURRICANE PRO 1.880**
SEITE 27
- wirtschaftliche Anschaffung dank Mehrfachnutzung
 - stabile Konstruktion aus hochfestem Aluminium
 - maximale Festigkeit bei minimalem Gewicht
 - 100 % Made in Germany
 - Abmessungen immer regelkonform

TECHNISCHE DATEN

Maßtoleranzen ± 10 mm, ± 2°, Daten unter Vorbehalt konstruktiver Änderungen

	NANO 1.155	NANO X 1.156	SMART² 2.360	SMART³ 2.370	AVANTI 1.736			AVANTI PRO 1.735		FLASH	
HMV-Nr.	18.50.03.5016	18.50.03.0254	18.50.03.0228	18.50.03.0229	18.50.03.0160			18.50.03.0204		18.50.03.1085	
					351 Rahmen kurz	352 Rahmen mittel	353 Rahmen lang	352 Rahmen standard	353 Rahmen lang	Midi	Maxi
Sitzbreite in mm	300 / 320 / 340 / 360 / 380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500	320 / 340 / 360 / 380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480	320 / 340 / 360 / 380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 / 520	320 / 340 / 360 / 380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 / 520	300 – 360	360 – 580	360 – 580	360 – 580	360 – 580	240 – 300	240 – 400
Gesamtbreite in mm	SB + 170	SB +160	SB + 180	SB + 180	SB + 180			SB + 180		SB + 180 (bei 0°) / SB + 220 (bei 3°) / SB + 260 (bei 6°)	
Breite fahrbereit in mm	470 / 490 / 510 / 530 / 550 / 570 / 590 / 610 / 630 / 650 / 670	480 / 500 / 520 / 540 / 560 / 580 / 600 / 620 / 640 / 660 / 680	500 / 520 / 540 / 560 / 580 / 600 / 620 / 640 / 660 / 680 / 700	500 / 520 / 540 / 560 / 580 / 600 / 620 / 640 / 660 / 680 / 700	Sitzbreite + 200 (mit Seitenteil CODE 100 SB +180)			SB + 190 (mit Seitenteil CODE 100 SB +180)			
Breite gefaltet in mm		320 bei 0° bzw. 370 bei 3°	280 bei 0° Radsturz bzw. 330 bei 3° Radsturz	280 bei 0° Radsturz bzw. 330 bei 3° Radsturz	280			280			
Sitztiefe in mm	380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500	380-500	380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500	380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500	330 – 380	350 – 460	480 – 530	350 – 430	460 – 500	240 – 300	320 – 400
Sitzhöhe vorne in mm	450 – 530	450-530	440 – 530	400 – 540	370 – 500	370 – 560	370 – 560	440 – 520		390 – 470	390 – 480
Sitzhöhe hinten in mm	360 – 510	360-510	400 – 530	370 – 530	370 – 470	390 – 520	390 – 520	420 – 520		360 – 440	390 – 470
Gesamthöhe in mm	Sitzhöhe hinten + Rückenhöhe	Sitzhöhe hinten+ Rücken- höhe	Sitzhöhe hinten + Rückenhöhe	Sitzhöhe hinten + Rückenhöhe	830	920	920	920		HSH + RH + 40	
Rückenhöhe in mm	variabel von 250 bis 450, +/- 15	variabel von 250 bis 450 + - 15 mm	variabel von 250 bis 500, + 25	variabel von 250 bis 500, + 25	340 – 400	380 – 500	380 – 500	340 – 440	–	250 – 400	
Rückenwinkelstellung in Grad										75° – 105°	
Armlehnenhöhe in mm			ca. 170 – 245	ca. 170 – 245	165 – 240	200 – 290	200 – 290	200 – 290			
Länge mit / ohne Fußstütze in mm	720 - 920 (abhängig von Rahmenlänge, Radgröße und Achsposition)	720 - 920 (abhängig von Rahmenlänge, Radgröße und Achsposition)	880 – 1.030 (abhängig von Rahmenlänge, Radgröße und Achsposition)	880 – 1.030 (abhängig von Rahmenlänge, Radgröße und Achsposition)	880 / 660	1.040 / 770	1.120 / 850	870 – 960 (abhängig von Rahmenlänge, Radgröße und Achsposition)	925 – 1.015 (abhängig von Rahmenlänge, Radgröße und Achsposition)	670 – 745	855 – 930
Unterschenkellänge in mm										200 – 290	250 – 320/330 – 440 ¹⁾
Personengewicht in kg	130	130	150	150	75	135	160	135		75	
Leergewicht in kg	ab 9,5	9	ab 9,5	ab 10,5	12	13	14	ab 11		10	
Zul. Gesamtgewicht in kg	139,5	139,5	159,5	ab 160,5	87	148	174	ab 146		85	
Transportgewicht in kg	6,5	6,5	7,4	6,5	8	8,5	9	8,5		8	
Antriebsrad in mm (Zoll)	610 (24") 635 (25") 660 (26")	600 (24") 635 (25") 660 (26")	610 (24") 635 (25") 660 (26")	560 (22") 610 (24") 635 (25") 660 (26")	508 (20") 560 (22") 610 (24") 635 (25") 660 (26")	508 (20") 560 (22") 610 (24") 635 (25") 660 (26")	508 (20") 560 (22") 610 (24") 635 (25") 660 (26")	610 (24")		550 (22") 600 (24")	
Sitzneigung in Grad								0° – 10°			

HURRICANE PRO 1.880			HURRICANE 1.880
	CODE 353 (24")	CODE 354 (26")	Bedarfsorientierte Fertigung. Technische Daten auf Anfrage
Rahmenlänge in mm	650	700	
Achsposition, stufenlos einstellbar in mm	60 – 170	60 – 170	
Unterschenkellänge in mm	310 – 430	360 – 480	
Rückenlehnenwinkel, fix in Grad	90° z. Fahrbahn	90° z. Fahrbahn	
Seitenteil Aluminium in mm	Höhe: 237 / Länge: 405	Höhe: 164 / Länge: 405	
Greifring	V2A, 6 Halter	V2A, 6 Halter	
Bereifung, Schwalbe	Speed Air	Speed Air	
Radsturz, fix in Grad	16°	16°	
Fußbrett	höhen- und winkeleinstellbar	höhen- und winkeleinstellbar	
Scater-Rolle in mm	80	80	
Rückengurt	anpassbar	anpassbar	
Sitzgurt	ja	ja	
Strapping-Gurt	ja	ja	
Stützrolle in mm	60 (doppelte Ausführung, verschweißt)	60 (doppelte Ausführung, verschweißt)	
Abweiser rund, verschweißt	ja	ja	

RAHMENFARBEN



¹⁾ gemessen von Oberkante Sitzgurt bis Mitte Fußbrett



STAY
ACTIVE

inspire joy of life
MEYRA®
GROUP

MEYRA®

MEYRA®
MDH

MEYRA®
REHAB

MEYRA®
NETTI

📍 **MEYRA GmbH**

Meyra-Ring 2
D-32689 Kalletal-Kalldorf

✉ info@meyra.de

Tel.: +49 5733 922 - 0
Fax: +49 5733 922 - 9311

www.meyra.de

MEYRA 2020-01 Technische Änderungen unserer Produkte sowie Druckfehler und Farbabweichungen in unseren Drucksachen behalten wir uns vor.
Ident-Nr. 261 504 600